

Terhességi teszt

Egyszerű

- Több mint 99%-os pontosság a menstruációja esedékességének napjától.
- **A teszt elvégzése előtt figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót.**

1 A teszt elvégzése



A tesztelést bármelyik napszakban elkezdheti a menstruáció esedékességének napjától.

- Amikor készen áll a teszt elvégzésére, vegye ki a tesztcsíkot a fóliacsomagolásból, és vegye le a kék kupakot. Azonnal használja fel a tesztcsíkot.



2 Várjon 2 percet

- Az ellenőrző ablakban megjelenő kék vonal azt jelzi, hogy a teszt működőképes.
- Eredményét **2 perc** elteltével olvashatja le.
- **Ne olvassa le eredményét addig, amíg az említett kék vonal meg nem jelenik.**
- Ha az ellenőrző ablakban **10 percen** belül nem jelenik meg a kék vonal, akkor a teszt nem működőképes (lásd a 6. kérdést).

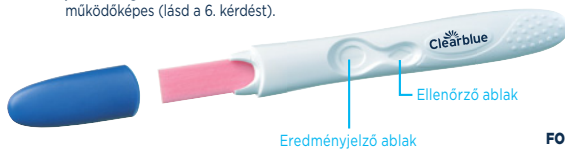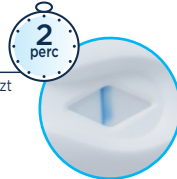

3 Olvassa le az eredményt

Most már leolvashatja eredményét az eredményjelző ablakban.



Ha az eredmény „Terhes”, olvassa el a 9. kérdést a Kérdések és válaszok részben.

Ha az eredmény „Nem terhes”, olvassa el a 10. kérdést a Kérdések és válaszok részben.

FONTOS! A teszt elvégzésétől számított **2-10 percen** belül olvassa le az eredményt. Az ezután bekövetkező változásokat ne vegye figyelembe.


Vizeletteszt

A tesztet végezheti közvetlenül a vizeletsugárban vagy tiszta, száraz tartályba gyűjtött vizeletmintával.


- Tartsa a színváltó véget lefelé mutató helyzetben a vizeletsugárba **vagy** az összegyűjtött vizeletmintába az ábrán látható módon **mindössze 5 másodpercig**.
- A színváltó vég ekkor gyorsan rózsaszínre vált, ami azt jelzi, hogy vizeletet szív magába. **A színváltó véget 5 másodpercen keresztül folyamatosan a vizeletben kell tartani.**
- Tartsa a színváltó véget lefelé mutató helyzetben, vagy fedtesse le a tesztcsíkot lapos felületre addig, amíg az ellenőrző ablakban meg nem jelenik a vonal.

Ezután visszahelyezheti a kupakot.

Ha a színváltó vég nem válik teljesen rózsaszínre, olvassa el az 5. kérdést.

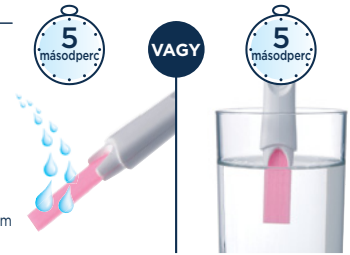

Nem számít, ha a „+” szimbólumot alkotó egyik vonal világosabb, vagy sötétebb mint a másik; az eredmény mindenképpen „Terhes”:

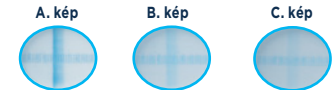

Ha továbbra is bizonytalan az eredményben, akkor a részletekért olvassa el a 7. kérdést.

Kérdések és válaszok

1 Milyen pontos a Clearblue teszt?

Laboratóriumi vizsgálatokban a teszt megbízhatósága 99% feletti a menstruáció esedékességének első napja után alkalmazva.

2 Hogyan működik a Clearblue teszt?

Ha Ön terhes, szervezete egy hCG (humán choriogonadotropin) nevű terhességi hormont termel. A terhesség korai szakaszában a szervezete hCG mennyisége megemelkedik. A teszt ezt a hormont már kis mennyiségben is ki tudja mutatni a vizeletből a menstruáció esedékességének első napjától (a vizsgálat érzékenysége 25 mIU/ml).

3 Mikor végezhetek tesztet a Clearblue egyszerű segítségével?

A tesztelést bármelyik napszakban elkezdheti a menstruáció esedékességének napjától. Menstruációja esedékességének meghatározásához számítsa ki a ciklusa szokásos hosszát úgy, hogy megszámolja a napokat a menstruáció első napjától a következő menstruációjának kezdete előtti napig.

- Ha a havi ciklusa rendszertelen, akkor a teszt elvégzése előtt az utóbbi hónapok leghosszabb ciklusát vegye figyelembe.
- A teszt elvégzése előtt kerülje a túlzott folyadékbevitelt.
- Ha az eredmény „Nem terhes”, de a terhesség gyanúja továbbra is fennáll, akkor olvassa el a 10. kérdést.

4 Gyógyszer vagy betegség befolyásolhatja-e az eredményt?

- A tesztelés kivételése **előtt** olvassa el az összes Ön által szedett gyógyszerhez mellékelt gyártói használati utasítást.
- A hCG-tartalmú termékenységet fokozó gyógyszerek félrevezető eredményeket adhatnak. (Ezeket a termékenységet fokozó gyógyszereket általában injekcióval adják be, és ha a beadás után túl hamar végzi el a tesztet, téves „Terhes” eredményt kaphat.)
- A megtermékenyülést elősegítő egyéb kezelések (például a klomifén-citrát), fájdalomcsillapítók és hormonális fogamzásgátlók (például fogamzásgátló tabletták) rendszerint nem befolyásolják az eredményt.
- Ha a hormonális fogamzásgátló alkalmazását nemrég hagyta abba, vagy fogamzásgátló terápiában (például klomifén-citrát kezelésben) részesül, akkor lehetséges, hogy menstruációja rendszertelenné válik, ami a teszt túl korai elvégzéséhez vezethet.
- Ha nemrég terhes volt (még ha nem is hordta ki a teljes időtartamot), akkor előfordulhat, hogy téves „Terhes” eredményt kap.
- A méhen kívüli terhesség, petefészekciszta, menopauza és néhány igen ritka betegség is félrevezető eredményt adhat.
- „Terhes” eredmény esetén előfordulhat, hogy a későbbiekben a terhesség korai szakaszában bekövetkező korai természetes vetélés miatt mégsem marad terhes.

Ha váratlan eredményt kap, beszélje meg orvosával.

5 Elvégeztem a tesztet, de a színváltó vég nem lett teljesen rózsaszín. Mit kell tennem?

Ha a színváltó vég nem színeződik teljesen rózsaszínre, akkor lehetséges, hogy nem itatta át elegendő vizelettel. Azonban, ha az ellenőrző ablakban lévő kék vonal a teszt elvégzésétől számított 10 percen belül megjelenik, akkor a teszt működőképes. Ha a teszt elvégzésétől számított 10 percen belül nem jelenik meg a kék vonal az ellenőrző ablakban, akkor olvassa el a 6. kérdést.

6 Elvégeztem a tesztet, de az ellenőrző ablakban nem jelent meg a kék csík. Mit kell tennem?

Ha a teszt elvégzésétől számított 10 percen belül nem jelenik meg a kék vonal az ellenőrző ablakban, akkor a teszt nem működőképes. Ennek a következő okai lehetnek: A színváltó vég nem volt lefelé néző helyzetben, vagy a tesztcsík a vizeletbe mártás után nem lett elfektetve. A vizelet túl sok vagy túl kevés volt. A mintavételnek 5 másodpercig kell tartania. Ismétlje meg a tesztet egy új tesztcsíkkal, és gondosan tartsa be az utasításokat. A vizeletmintát akár egy tiszta, száraz tartályba is leveheti, melybe aztán kizárólag a színváltó véget mártja bele csupán 5 másodperc.

7 Mit tegyek, ha nem vagyok biztos az eredményben?

- A „Terhes” eredményhez az szükséges, hogy a teszt elvégzésétől számított 10 percen belül egy kék csík jelenjen meg az ellenőrző ablakban, illetve egy „+” szimbólum az eredményjelző ablakban. A „+” szimbólum többféleképpen jelenhet meg az eredményjelző ablakban, ám a „+” szimbólumot alkotó vonalaknak és az ellenőrző ablakban lévő csíknak hasonló szélességűnek kell lenniük (lásd az A-C képeket).
- **A. kép**
Ezen kép megjelenése valószínűbb, ha Ön terhes, és a tesztet néhány nappal a menstruáció esedékessége után végzi, ugyanis a hCG-szintek ekkor magasabbak.

B. kép

Ez a kép nem szokatlan, ha Ön terhes, és a tesztet a menstruáció esedékességének napján vagy akörül végzi, ugyanis a hCG-szintek ekkor még viszonylag alacsonyak.

C. kép

Ez a kép szintén „Terhes” eredményt jelez. Ha továbbra sem biztos az eredményben, akkor a teszt megismétlése előtt várjon legalább 3 napot, és gondosan tartsa be az utasításokat.

- A „Nem terhes” eredményhez az szükséges, hogy a teszt elvégzésétől számított 10 percen belül egy kék vonal jelenjen meg az ellenőrző ablakban, illetve egy „-” szimbólum az eredményjelző ablakban. Ha az eredmény „Nem terhes”, de a terhesség gyanúja továbbra is fennáll, akkor olvassa el a 10. kérdést.

8 Meddig lesz látható az eredmény?

Az eredmény a teszt elvégzésétől számítva legfeljebb 10 percig bármikor leolvasható. A 10. perc letele után az eredményben bekövetkező bármilyen változást figyelmen kívül kell hagyni.

9 A teszt szerint terhes vagyok. Mit kell tennem?

Ha a teszt szerint Ön terhes, akkor keresse fel orvosát, aki elvégzi a további teendőket kapcsolatos tanácsokkal.

10 A teszt szerint nem vagyok terhes. Mit kell tennem?

Lehet, hogy nem terhes, de az is előfordulhat, hogy a terhességi hormon szintje nem volt elég magas a kimutatáshoz, vagy Ön rosszul számította ki menstruációja esedékességét. Ha a menstruációja már esedékes lenne, akkor 3 nap múlva ismétlje meg a tesztet, ha a terhesség gyanúja továbbra is fennáll. Ha ez a teszt is „Nem terhes” eredményt adott, és a menstruációja még mindig nem kezdődött meg, akkor keresse fel orvosát.

Otthoni tesztelésre. Kizárólag *in vitro* diagnosztikai felhasználásra. Nem használható belsőleg. Ne használja fel újra. Gyermekektől elzárva tartandó. 2-30 °C között tárolandó. Ha hűtőben tárolta a készüléket, akkor tesztelés előtt várjon 30 percet, hogy szoba-hőmérsékletre melegedhessen. Ne használja, ha a fóliacsomagolás sérült. Ne használja a lejáratú időn túl. Használat után dobja a normál háztartási (kommunális) hulladékba.

	Gyártó		Ne használja újra!
	Gyártási szám		<i>In vitro</i> diagnosztikai orvosi eszköz
	Lejáratú dátum		Hőmérséklet-tartomány: 2-30 °C

www.clearblue.com

✉ Forgalmazó: ADPH Kft., H-1092 Budapest, Ráday utca 58. Magyarország

✉ SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Svájc. A Clearblue az SPD vállalat védjegye. © 2019 SPD. Minden jog fenntartva.



0123

